

Transportný roztok (M)

kat. č. 8867

Súprava reagensí na odber, prepravu a skladovanie klinického materiálu

Obsah súpravy: 100 skúmaviek po 2 ml s rozmermi 13x75 mm so skrutkovacím uzáverom

Zloženie: tlmivý roztok na báze 5 M guanidínu

Biologický materiál: výtery z nosa, nosohltanu, orofaryngu, hlieny


Skladovanie a preprava: pri teplote (2–30) °C

Dátum expirácie: 24 mesiacov od dátumu výroby



Transportný roztok (M) je efektívne a bezpečné riešenie na skladovanie a prepravu biologického materiálu za účelom následnej detekcie nukleových kyselín metódou Real-Time PCR.

- Zabezpečuje denaturáciu bielkovín a zachovanie RNA/DNA vo vzorkách
- Zjednodušuje postup inaktivácie biologického materiálu, ku ktorému dochádza v primárnej skúmavke bez otvárania viečok a rizika infekcie pre účinkujúceho
- Optimalizuje proces automatickej prípravy vzorky: vďaka štandardnej veľkosti skúmaviek a unikátnemu čiarovému kódu je možné používať skúmavky s biologickým materiálom na automatickej izolačnej stanici

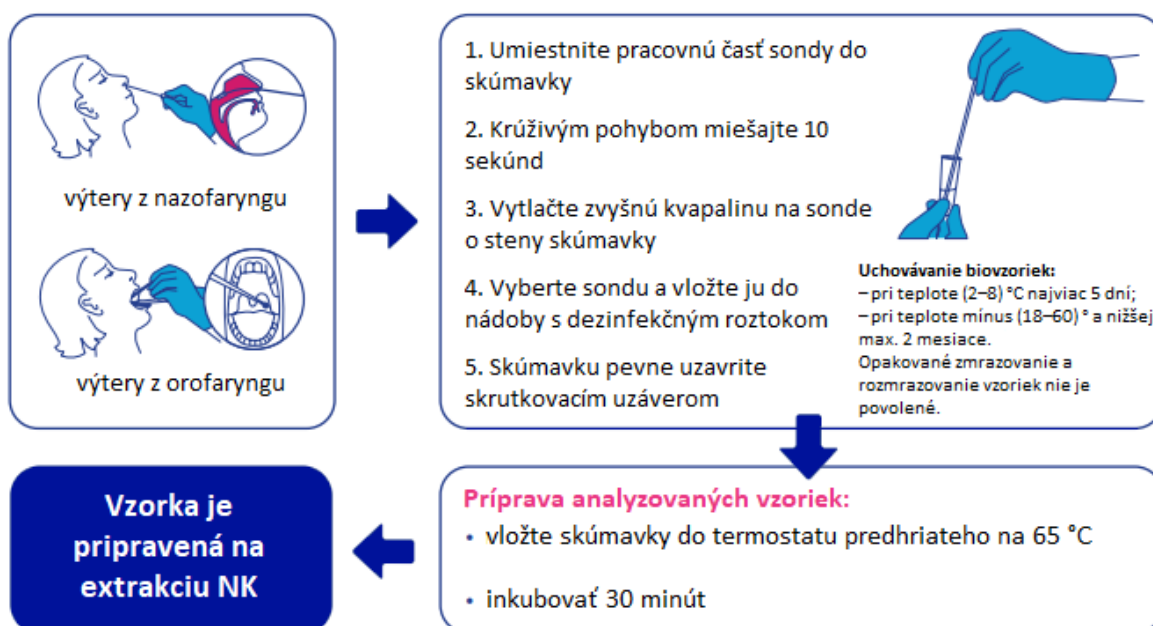

Diagnostické centrum DNK, s.r.o.

Brestová 14, 821 02 Bratislava

+421 911 299 324, +421 911 211 404

dnk@pharma.sk, diagnostika@pharma.sk

www.pcr.sk